


Kegel Master


Gen 2

Your Personal Coach Kegel Exercise

EC REP Interslash BV
Tomatenmarkt 1, 1681 PH Zwaagdijk, NL

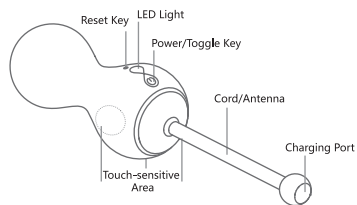

Package List

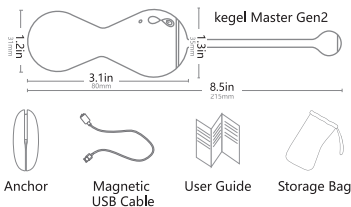

Specification

Material: Body-safe silicon /ABS | Weight: 58g | Battery: 200mAh
 Charging voltage: 5V | Maximum Charging Current: 500mA
 Charging time: 60 minutes | Working time: 180 minutes
 Waterproof: IPX6

Smartphone Workout Mode

Step1: APP Download

1. Search for "Magic Kegel" in IOS App Store or Google Play
2. Scan below QR code to download directly.
3. Download from www.magicmotion.fun




Step2: Run "Magic Kegel" APP


Turn on your Kegel Master Gen 2 device



Follow App guide to connect

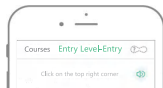

It's connected successfully when it shows "connected"

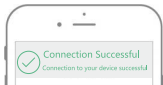

Step3: Enjoy Kegel Training

Find a comfortable position for inserting. Many women find lying on the back or standing as most comfortable. Kegel Master Gen 2 LED facing upward, please check below picture. For pushing forward easily, apply a bit water-based lubricant on the top of device or on the condom.



Tips: Please leave the cord of Kegel Master Gen 2 outside the body, at least 4 cm length, to keep good signal without barrier.

Step4: Power Off

The device will turn off after pressing Power Key for 3 seconds, the LED light will turn off to indicate turn-off status.




Tips: Kegel Master Gen 2 will turn off automatically when it disconnected with App in 5 minutes.

Independent Mode (Without SmartPhone)


- Squeeze for vibration

Turn on Kegel Master Gen 2 and squeeze pelvic floor muscles to control the strength of vibration of device.

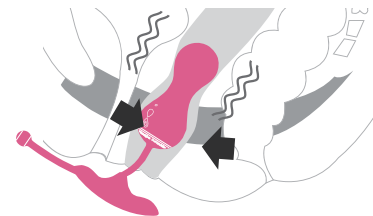


Charging Battery

Step1 Open the cap of the magnetic charging port for charging.

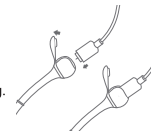

Step2 Connect USB port to smartphone power adapter, laptop, Computer or power charging bank.

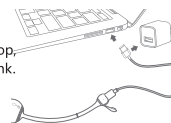

Maintenance

Step3 LED light on to show charging normally. The LED light will be off when the charging is finished.

Tips: For first use, please charge the battery for 1 hour after the power is fully used.



Cleaning Magic kegel Master Gen2

Before Usage


Please clean Kegel Master Gen 2 with cleanser or warm water and anti-bacterial soap before first use.

After Usage

Please clean Kegel Master Gen 2 with cleanser or warm water and anti-bacterial soap and dry it.

Storage

Keep Master in a cool and ventilated place. Avoid direct sunlight and keep it away from children.

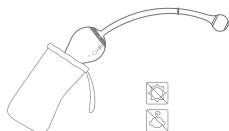

Warranty Terms & Conditions

Magic motion warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify magic motion during the warranty period, magic motion will, at its discretion, replace the product free of charge.

The warranty covers working parts that affect the function of the product. It does NOT cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the product (or its accessories) will void the warranty.

Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchase receipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period.

Magic Motion Service Card

User Information

Name:

Tel:

Address:

Reason for Return:


Seller Information

Company:


Tel:

français

Produit

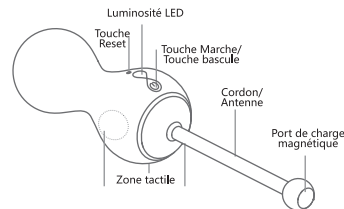

Liste de colisage

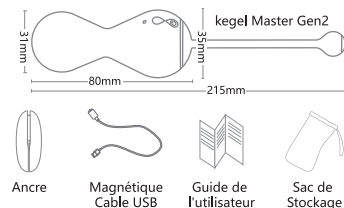

Specification

Matériau: Silicone de sécurité pour le | Poids: 58g
Tension de charge: 5V | Courant de charge maximum: 500mA
Temps de charge: 60 minutes | Temps de travail: 180 minutes
Étanche: IPX6 | Batterie: 200mah

Usage

Première utilisation

Etape 1: Téléchargement de l'APP

1. Recherchez "Magic Kegel" dans l'App Store IOS ou Google Play



2. Scan ci-dessous le code QR à télécharger directement.



3. Télécharger à partir de.


www.magicmotion.fun

Etape 2 Exécuter " Magic Kegel " APP

Allumez votre Kegel Master Gen2.



Suivez le guide de l'application pour vous connecter

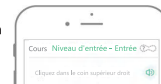

Il est connecté avec succès lorsqu'il affiche 'connecté'



Usage

Étape 3 Profitez de l'entraînement Kegel

Trouvez une posture confortable pour l'insertion. Beaucoup de femmes trouvent que s'allonger sur le dos ou debout est le plus confortable. Kegel Master Gen2 LED vers le haut, s'il vous plaît voir l'image ci-dessous. Pour faciliter l'insertion, appliquer un peu de lubrifiant à base d'eau sur le dessus du Kegel Master Gen2 ou sur le préservatif.



Des pourboires : Veuillez laisser le cordon du Kegel Master Gen 2 à l'extérieur du corps, d'au moins 4 cm de long sans barrière, pour garder un bon signal.

Étape 4 Mise hors tension

L'appareil s'éteint après avoir appuyé sur Power Key pendant 3 secondes, le voyant LED s'éteint pour signaler l'état de mise hors tension.




Astuces : "Kegel Master Gen2" s'éteindra automatiquement lorsqu'il se déconnectera de l'application en 5 minutes

Usage

Modes indépendants(Sans SmartPhone)


Pression pour mode vibration (mode par défaut)

Activez Kegel Master Gen2 et pressez les muscles du plancher pelvien pour contrôler la force des vibrations de Kegel Master Gen2.

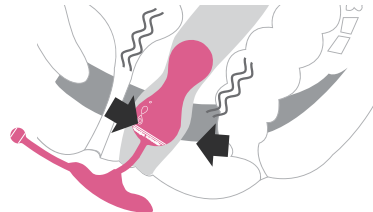


Chargement de la batterie

Etape1 Ouvrez le capuchon du port de charge magnétique pour la charge.

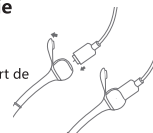

Étape 2 Connectez le port USB à l'adaptateur d'alimentation du smartphone, à l'ordinateur portable, au PC ou au chargeur

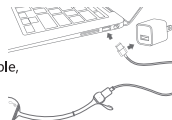

Entretien

Etape3 Le voyant DEL allumé indique que la charge est normale. Le voyant DEL s'éteint lorsque la charge est terminée.



Tips: For first use, please charge the battery for 1 hour after the power is fully used.

Cleaning Magic kegel Master Gen2

Avant Usage


Veuillez nettoyer Kegel Master Gen2 avec un nettoyant ou de l'eau chaude et du savon antibactérien avant la première utilisation.

Après usage

uillez nettoyer Kegel Master Gen2 avec un nettoyant ou de l'eau tiède et du savon antibactérien et séchez-le.

Stokage

Conserver Kegel Master Gen2 dans un endroit frais et ventilé. Évitez les rayons directs du soleil et tenez-le à l'écart des enfants.

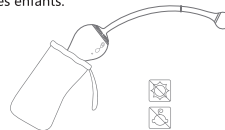

Conditions de Garantie

Magic Motion bons de souscription ce produit pour une période d'un (1) an, après la date d'achat originale , contre les défauts de fabrication ou de matériel . Si vous découvrez un défaut et aviser magic motion au cours de la période de garantie , magic motion sera, comme sa discrétion, de remplacer le produit gratuitement.

La garantie couvre les pièces de travail qui affectent la fonction du produit . Il ne couvre pas la détérioration cosmétique causée par l'usure normale ou des dommages causés par un accident , une mauvaise utilisation ou de négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démonter le produit (ou ses accessoires) annulera la garantie .

Les réclamations sous garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la demande se situe dans la période de garantie . Pour valider votre garantie , s'il vous plaît garder votre facture d'achat d'origine avec ces conditions de garantie pour la durée de la période de garantie .

Magic Motion carte de Service

Info client:

Nom:

Tel:


Adresse:

Raison de Retour:


Information Vendeur

Nom de l' entreprise:

Tel:

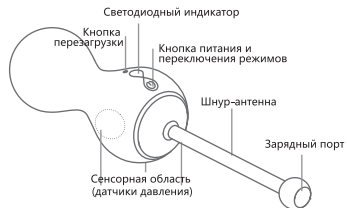

Состав упаковки

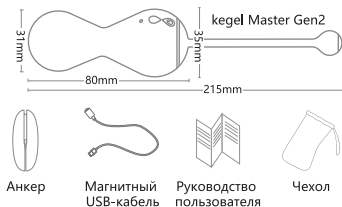

Техническая характеристика

Материал:кремний / ABS | Аккумулятор: 200 мА/ч | Вес:58 г
 Зарядное напряжение: 5V | водонепроницаемый: IPX6
 Время зарядки: 60 минут | Рабочее время: 180 минут
 Максимальный зарядный ток: 500mA

Первое использование

Шаг 1: Скачайте приложение

1. Найдите приложение "Magic Kegel" в App Store или Google Play.

2. Отсканируйте QR-код и скачайте приложение.

3. Скачайте приложение с сайта.

www.magicmotion.fun



Шаг 2 Запустите приложение "Magic Kegel"


Включите свой тренажер Kegel Master Gen 2.



Следуйте инструкциям приложения для установления соединения.




В приложении появится оповещение об успешном соединении, когда тренажер подключится к смартфону.

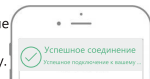

Шаг 3: Занимайтесь с удовольствием

Примите удобное положение для введения тренажера. Многим женщинам удобнее делать это лежа или стоя. Светодиодный индикатор должен быть направлен вверх, как показано на рисунке. Для более легкого введения можно нанести на прибор немного смазки на водной основе или использовать презерватив..

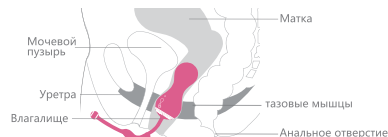

Подсказка: Необходимо оставлять шнур-антенну снаружи (минимум 4 см) для поддержания хорошего сигнала.

Шаг 4: Выключение

Для выключения прибора нажмите на кнопку питания и удерживайте ее 3 секунды. Светодиодный индикатор погаснет, показывая, что прибор выключен




Советы: "Kegel Master Gen2" выключится автоматически когда он отключается от приложения через 5 минут

Автономные режимы(без смартфона)


Режим вибрации при сжатии
(режим по умолчанию)

Включите тренажер и напрягайте мышцы тазового дна, контролируя силу вибрации.

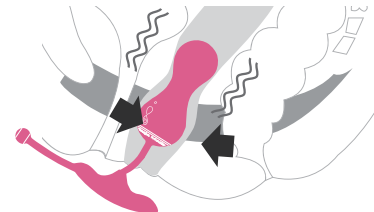


Зарядка батареи

Шаг 1 Ouvrez le capuchon du port de charge magnétique pour la charge.

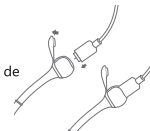

Шаг 2 ПодключитеUSB-порт кабеля к адаптеру смартфона, ноутбуку, компьютеру или к внешнему аккумулятору.

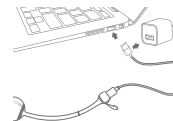

Шаг 3: Светодиодный индикатор загорится, показывая, что тренажер заряжается. Когда тренажер будет полностью заряжен, индикатор погаснет.

Подсказка: При первом использовании рекомендуется сначала полностью разрядить батарею, после чего заряжать прибор не менее 1 часа.



Очистка тренажера kegel Master Gen2

Перед использованием


Перед первым использованием очистите тренажер дезинфицирующим средством или теплой водой с антибактериальным мылом.

После использования

Очистите тренажер дезинфицирующим средством или теплой водой с антибактериальным мылом и высушите.

Хранение

Храните тренажер в прохладном вентилируемом месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не давайте детям.

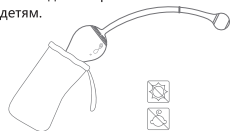

Условия Гарантии

Magic Motion дает гарантию на Устройство равную 1 году после даты покупки на заводские неисправности и брак материала. Если Вы обнаружите дефект в течение Гарантийного срока – проинформируйте Magic Motion через магазин, в котором было куплено устройство, и оно

допущенного при изготовлении. Гарантия покрывает рабочие части, которые влияют на функциональность изделия. Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и повреждения в случае неправильного или небрежного использования или несчастного случая. Любая попытка разобрать или вскрыть Устройство приведет к аннулированию Гарантии.

Претензии по гарантии должны быть подтверждены доказательством даты покупки. Пожалуйста, храните Ваш оригинал квитанции (чека) об оплате и настоящую инструкцию до истечения гарантийного срока.

Magic Motion Сервисная карточка

Информация о пользователе

Имя:

Телефон


Адрес:

Причина возврата:


Информация о продавце

Название компании

Телефон

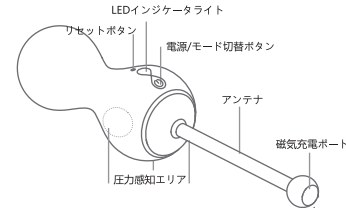

パッキングリスト

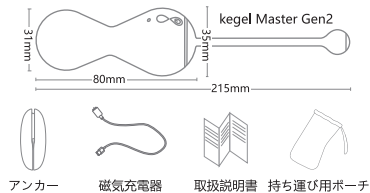

製品仕様

素材:FDA認証シリコン/ABS | 電池: 200mah | 重量:58 g
最大充電電流: 500mA | 充電電圧: 5V | 防水性能: IPX6
充電時間: 60 minutes | 勤務時間: 180 minutes

初めてお使いの方へ

ステップ1. アプリのダウンロード

ダウンロードには3種類の方法があります。

1. 「Magic Kegel」を
IOS App StoreまたはGoogle Play



2.QRコードのスクリーンからダウンロード
を行うことができます。



3.以下のウェブサイトからダウンロード
を進めることも可能です。

www.magicmotion.fun

ステップ2. 「Magic kegel」アプリを起動してください。

Kegel Master Gen2の電源を
オンにします。



アプリに説明が表示されますので、
それに従って、デバイスとの接続
を行ってください。



「接続成功」を示すメッセージが
表示されれば、接続完了です。



製品の使い方

ステップ3. 使い方のヒント

Kegel Master Gen2の電源ボタンが上になるようにして、ゆっくりと挿入してください。水溶性のローションやコンドームと一緒に使用することで、よりスムーズに挿入することが可能となります。



Kegel Master Gen2のアンテナ部分は信号の受信機能を果たすため、ご使用中には必ずこの部分を4cmほど体の外に出すようにしてください。

ステップ4. 電源の切り方

押した後、デバイスはオフになります
3秒間電源キー、LEDライト
ターンオフ状態を示すためにオフになる。




ヒント: Kegel Master Gen 2は自動的にオフになります5分でアプリケーションとの接続が切断されました。

製品の使い方


オフラインモード(スマートフォンを使用しない場合) - 振動を絞る

Kegel Master Gen 2をオンにして骨盤底を絞る装置の振動の強さを制御する筋肉。

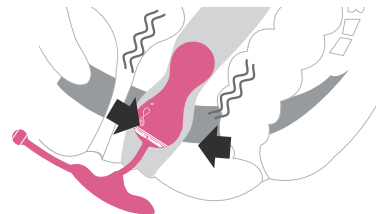


充電の仕方

ステップ1 充電を行うには磁気充電ポートのキャップを開いてください。

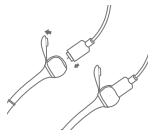

ステップ2 充電ケーブルのUSB端子をパソコンやUSB電源アダプタに接続します。

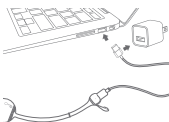

サービス

ステップ3 充電が正常に機能していることを示すライトが点灯します。充電完了時にはこのライトが消えます。



初回ご使用時には電池を使い切った後に1時間ほど充電を行ってください。

クリーニングシミュレータ kegel Master Gen2

ご使用前


水や抗菌洗剤を使って綺麗に洗浄してください。

ご使用後

水溶性の洗剤を使ってKegel Master Gen2を綺麗に洗浄し、十分に乾燥させてください。

保管方法

直射日光を避けて保管してください。またお子様の手の届かない場所をお選びください。

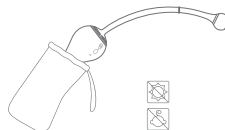

品質保障について

1. 本製品は購買日から起算して一年間の品質保証がついています。
2. 外部または人為的原因 による故障、また、当社以外による改造、修理に起因した故障は保障の対象外となります。
3. 品質保証期間内の保障の際は品質保障カードと購買領収書の提出が必要となります。

品質保証カード


お客様の情報

名前:


電話:

住所:

故障原因:

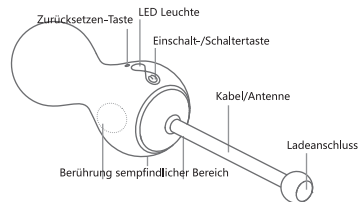

Paketliste

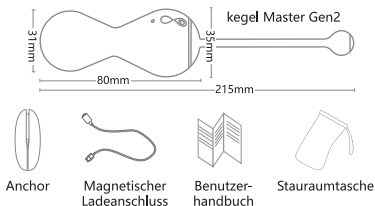

Spezifikation

Material: Körpersicheres Silikon /ABS | Gewicht: 58g
 Ladespannung: 5V | Maximaler Ladestrom: 500mA
 Ladezeit: 60 Minuten | Arbeitszeit: 180 Minuten
 Wasserdicht: IPX6 | Batterie: 200mAh

Smartphone Workout-Modus

Schritt 1: APP Download

1. Suchen Sie nach "Magic Kegel" im iOS App Store oder Google Play
2. Scannen Sie unter dem QR-Code, den Sie direkt herunterladen können.
3. Download von www.magicmotion.fun



Schritt 2: "Magic Kegel" APP starten

Schalten Sie Ihr Kegel Master Gen 2 Gerät ein.



Folgen Sie der App-Anleitung, um eine Verbindung herzustellen.



Es ist erfolgreich verbunden, wenn es "verbunden" anzeigt.



Schritt 3: Kegel Training genießen

Finden Sie eine bequeme Position zum Einführen. Viele Frauen finden es am bequemsten, auf dem Rücken zu liegen oder zu stehen. Kegel Master Gen 2 LED nach oben gerichtet, siehe Bild unten. Um leicht nach vorne zu drücken, tragen Sie etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf die Oberseite des Gerätes oder auf das Kondom auf.



Tipps: Bitte lassen Sie das Kabel von Kegel Master Gen 2 außerhalb des Körpers, mindestens 4 cm lang, um ein gutes Signal ohne Barriere zu erhalten.

Schritt 4 Ausschalten

Das Gerät schaltet sich aus, nachdem Sie die Einschalt-Taste 3 Sekunden lang gedrückt haben, die LED-Leuchte erlischt, um den Ausschaltzustand anzuzeigen.



Tipps: Kegel Master Gen 2 schaltet sich automatisch aus, wenn die Verbindung mit der App in 5 Minuten getrennt wird.


Unabhängiger Modus (ohne SmartPhone) - für Vibration drücken

Schalten Sie Kegel Master Gen 2 ein und drücken Sie die Beckenbodenmuskulatur, um die Stärke der Vibration des Gerätes zu kontrollieren




Batterie laden

Schritt 1 Öffnen Sie die Kappe der magnetischen Ladeöffnung zum Laden.

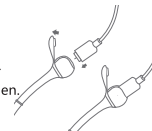


Schritt 2 Schließen Sie den USB-Anschluss an das Smartphone -Netzteil, den Laptop, den Computer oder die Ladebank an.

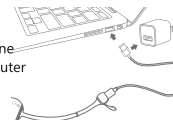

Instandhaltung

Schritt 3 Die LED leuchtet auf, um den normalen Ladevorgang anzuzeigen. Die LED-Leuchte erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Tipps: Für den ersten Gebrauch laden Sie den Akku bitte 1 Stunde lang auf, nachdem der Strom vollständig verbraucht ist.

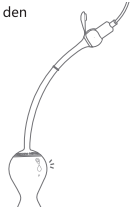

Reinigung von Kegel Master Gen 2

Vor der Verwendung


Bitte reinigen Sie Kegel Master Gen 2 vor dem ersten Gebrauch mit Reiniger oder warmem Wasser und antibakterieller Seife.

Nach der Verwendung

Bitte reinigen Sie Kegel Master Gen 2 mit Reiniger oder warmem Wasser und antibakterieller Seife und trocknen Sie es.

Aufbewahrung

Bewahren Sie den Master an einem kühlen und belüfteten Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und halten Sie sie von Kindern fern.

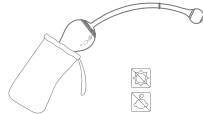

Garantiebedingungen

Magic Motion garantiert, dieses Produkt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr, nach dem ursprünglichen Kaufdatum, gegen Defekte durch fehlerhafte Verarbeitung oder Materialien. Wenn Sie einen Fehler entdecken und benachrichtigen Magic Motion davon, während der Garantiezeit, wird Magic Motion, wie eigenem ermesen, das Product kostenlos ersetzen. Die Garantie erstreckt sich Verschleißteile, die die Funktion des Produkts beeinflussen. Es gilt nicht für kosmetische Beeinträchtigung durch normale Abnutzung oder Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder Nachlässigkeit verursacht wurden. Jeder Versuch, das Product zu öffnen oder auseinander zu nehmen (oder das Zubehör) wird die Garantie ungültig. Gewährleistungsansprüche müssen durch hinreichende Beweise, dass das Datum der Forderung innerhalb der Garantiezeit unterstützt werden. Um Ihre Garantie zu validieren, halten Sie bitte Ihren Originalkaufbeleg zusammen mit dieser Garantiebedingungen für die Dauer der Gewährleistungsfrist.

Magic Motion Service Card

Benutzerinformation

Name:

Tel:

Adresse:

Rücksendegrund:


Verkäuferinformation

Firma:


Tel:

한국어

생성물

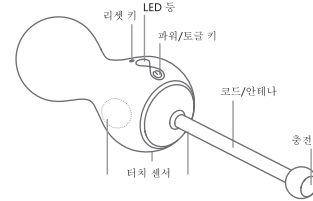

포장 목록

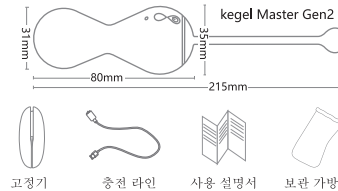

사양

재료: silicon /ABS | 중량: 58g | 배터리: 200mAh | 충전 전압: 5V
충전 시 최대 전류: 500mA | 충전 시간: 60 분
구동 시간: 180 분 | 방수: IPX6

용법

스마트폰 구동 모드

Step1: APP 다운로드

1. IOS App store 나 Google Play 에서 “Magic Kegel” 검색

2. 아래 QR 코드를 스캔해서 바로 다운로드.

3. 에서 다운로드

www.magicmotion.fun



Step2: “Magic Kegel” APP 실행

Kegel Master Gen 2 장치를 켭니다



연결을 위해 App 가이드를 따라 하시기 바랍니다.



"connected"라는 문구가 뜨면 성공적으로 연결이 된 것입니다.



Step3: Kegel 훈련 즐기기

먼저 삽입하기 편안한 자세를 찾으십시오. 대다수의 여성들은 등을 대고 눕거나 서있는 자세를 가장 선호합니다. **Kegel Master Gen 2 LED**가 위를 향해야 합니다, 아래에 있는 사진을 확인 하십시오. 좀 더 쉽게 밀어 넣기 위해 약간의 수용성 젤을 바르거나 콘돔을 씌웁니다.



팁: 좋은 신호를 유지하기 위해 **Kegel Master Gen 2**의 코드를 신체 외부로 4cm 이상 두시기 바랍니다.

Step4: 전원 끄기

키를 3초간 누르면, LED 등이 꺼지면서 전원 꺼짐 상태를 나타냅니다..




팁: Kegel Master Gen 2는 앱 연결이 끊어지면 5분안에 자동으로 전원이 꺼집니다.

독립 모드 (스마트폰 없이)


- 진동을 위해 힘을 주세요

Kegel Master Gen 2를 커시고 괄반 근육을 이용해 힘을 주어 진동 강도를 컨트롤 하십시오.

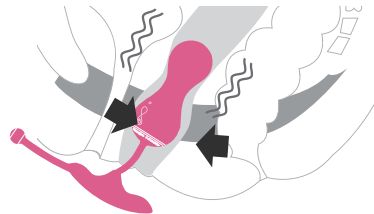


배터리 충전


Step1 충전을 위해 충전 포트 캡을 엽니다..

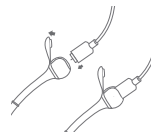

Step2 step2USB 포트를 스마트폰이나 전원 어댑터, 노트북, 컴퓨터 또는 휴대용 배터리에 연결 하십시오.

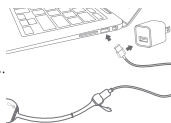

Step3 step3 LED 등이 켜져서 정상적으로 충전 되는지 보여줍니다. 충전이 완료되면 LED등이 꺼지게 됩니다.

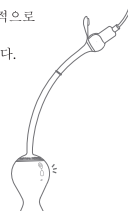

팁: 첫 사용시, 완전히 방전될 때까지 사용하고 난 후에, 1시간 동안 배터리를 충전해 주십시오.

Magic kegel Master Gen 2 세정

사용 전


처음 사용하시기 전에 세정제나 혹은 따뜻한 물과 항균 비누로 **Kegel Master Gen 2**를 깨끗이 씻어 주시기 바랍니다.

사용 후

Kegel Master Gen 2를 세정제나 따뜻한 물과 항균 비누로 깨끗이 씻어 말려주시기 바랍니다.

보관

시원하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주십시오. 직사광선을 피하고 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.

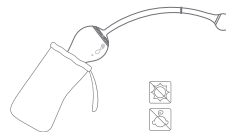

보증의 통지

1. 본 제품의 보증 기간은 1 년입니다. 제품 이외의 이유로 인한 손상에 대해서는보증 대상에서 제외됩니다.
2. 제품 자체의 품질에 대해서는 당사에 문의하십시오. 스스로 분해하지바랍니다. 그렇지 않다고 보장되지 않습니다.
- 3.이 카드로 구매 증을 구매자에게 갖다 구매자에게 연락하십시오.

참 애프터 서비스 카드

사용자 정보

이름

전화 :


거주지 :

애프터 서비스인.인. :



판매자 정보

공급 업체 :

전화 :

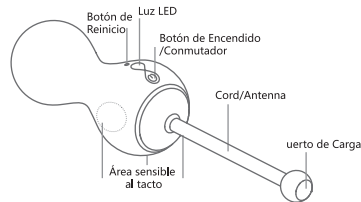

Lista de Empaque

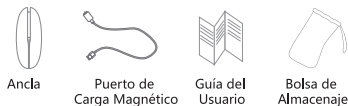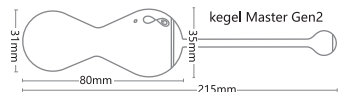

Specification

Material: Silicón seguro para el cuerpo /ABS | Peso: 58g
 Voltaje de Carga: 5V | Tiempo de funcionamiento: 180 minutos
 Tiempo de Carga: 60 minutos | Corriente de Carga Máxima: 500mA
 Impermeabilidad: IPX6 | Batería: 200mAh

Modo de Entrenamiento para Teléfono Inteligente

Paso 1: Descargue la Aplicación

1. Busque **"Magic Kegel"** en IOS App Store o Google Play
2. Escanee el código QR para descargarlo directamente.
3. Descargue desde www.magicmotion.fun



Paso 2: Ejecute la Aplicación "Magic Kegel"

Encienda su dispositivo Kegel Master Gen 2.



Siga la guía de la Aplicación para conectar.



Se ha conectado exitosamente cuando muestra "conectado"



Paso 3. Disfrute del Entrenamiento de Kegel

Encuentre una posición cómoda para insertarlo. A muchas mujeres les resulta más cómodo acostarse boca arriba o mantenerse en pie. Coloque la luz LED del Kegel Master Gen 2 mirando hacia arriba, por favor consulte la figura de abajo. Para empujarlo hacia arriba fácilmente aplique un poco de lubricante a base de agua en la parte superior del dispositivo o en el condón.



Consejo: Por favor deje el cable del Kegel Master Gen 2 fuera del cuerpo, al menos 4 cm de para mantener una buena señal sin barreras

Step4 Apagar


El dispositivo se apagará después de presionar el botón de encendido por 3 segundos, la luz LED se apagará para mostrar el estado de apagado.



Consejo: El Kegel Master Gen 2 se apagará automáticamente cuando ha estado desconectado de la aplicación por 5 minutos.


Modo Independiente (sin el teléfono inteligente) - Apriete para que vibre

Encienda el Kegel Master Gen 2 y apriete los músculos del suelo pélvico para controlar la fuerza de vibración del dispositivo.

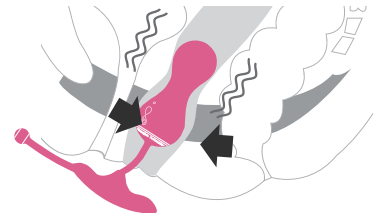


Cargando la Batería

Paso 1 Abra la tapa del Puerto magnético de carga para cargar.

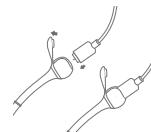

Paso 2 Conecte el puerto USB a un teléfono inteligente, adaptador de alimentación, computadora portátil, ordenador o banco de energía.

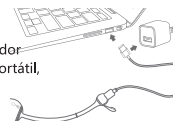

Mantenimiento

Paso 3 La luz LED encendida muestra que se está cargando normalmente.
La luz LED se apagará cuando esté cargado



Consejo: Para el primer uso, por favor cargue la batería por 1 hora después que la energía se haya usado por completo

Limpieza del Magic kegel Master Gen 2

Antes de Usar


Por favor limpie el Kegel Master Gen 2 con un limpiador o agua caliente y jabón antibacterial antes del primer uso.

Después de Usar

Por favor limpie el Kegel Master Gen 2 con un limpiador o agua caliente y jabón antibacterial y séquelo.

Almacenaje

Manténgalo en un lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa y manténgalo alejado de los niños.

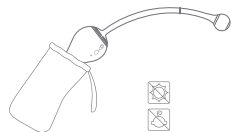

Términos de Garantía & Condiciones

Magic Motion cuenta con una garantía de un año posterior a la fecha de compra, para productos que presenten defectos de fabricación o materiales. Si usted descubre un defecto y notifica a Magic Motion durante el periodo de garantía, Magic Motion reemplazará el producto de forma gratuita según su criterio.

La garantía abarca piezas que afectan a la función del producto. No abarca el deterioro causado por el desgaste, accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el producto (o sus accesorios), anulará la garantía. Para validar la garantía, guarde el recibo original de la compra junto con las condiciones de garantía, dentro del periodo de vigencia de la misma.

Las reclamaciones en garantía deben ser apoyadas por pruebas razonables. La fecha de la reclamación tiene que estar en el periodo de garantía. Para validar la garantía, sírvase guardar el recibo original de compra junto con las condiciones de garantía en el periodo de garantía.

Magic Motion Tarjeta de servicio

Información de usuario

Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Motivo de Retorno:


Información de vendedor

Empresa:


Teléfono:

Português

produtos

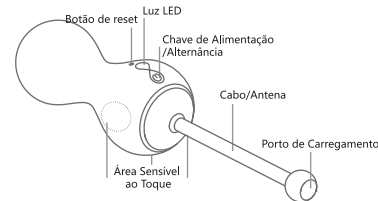

Lista de Embalagem

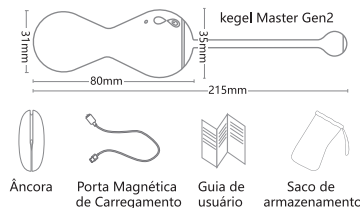

Especificação

Material: Silicone seguro para o corpo/ABS | Peso: 58g
Tensão de Carga: 5V | Corrente Máxima de Carregamento: 500mA
O tempo de carga: 60 minutos | Tempo de Trabalho: 180 minutos
À prova d'água: IPX6 | Bateria: 200mAh

Uso

Modo de Treinamento para Smart Phones

Passo 1: Download do APP

1. Procure por "Magic Kegel" na App Store do iOS ou no Google Play



2. Digitalize abaixo o código QR para baixar diretamente.



3. Download de

www.magicmotion.fun

Passo 2: Execute o aplicativo "Magic Kegel"

Ligue o seu dispositivo Kegel Mágico Gen 2g



Siga o guia do Aplicativo para conectar




Está conectado com sucesso quando mostra "conectado"



Passo 3: Aproveite o Treinamento

Encontre uma posição confortável para inserir. Muitas mulheres acham mais confortável deitar de costas ou de pé. Coloque o LED Kegel Master Gen 2 para cima, como mostrado na imagem abaixo. Para avançar facilmente, aplique um pouco de lubrificante à base de água no topo do dispositivo ou no preservativo.

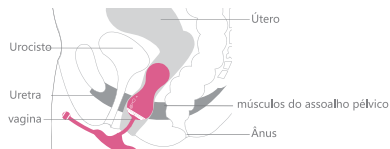

Tips: Please leave the cord of Kegel Master Gen 2 outside the body, at least 4 cm length, to keep good signal without barrier.

Passo 4: Desligar


O dispositivo irá desligar depois de pressionar a teca de energia por 3 segundos, a luz LED irá desligar para indicar o status de desligamento.




Dicas: Kegel Master Gen 2 será desligado automaticamente quando desconectado com o aplicativo em 5 minutos.

Modo Independente (sem SmartPhone)
- Aperte para Vibrar

Ligue o Kegel Master Gen 2 e aperte os músculos do assoalho pélvico para controlar a força da vibração do dispositivo.

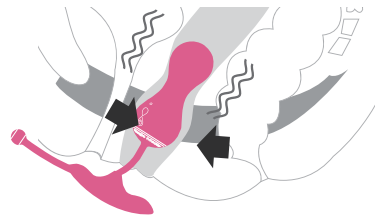**Carregar a Bateria**

Passo 1 Abra a tampa da porta de carregamento magnético para carregar.

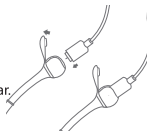

Passo 2 Conecte a porta USB ao adaptador de energia do smartphone, laptop, computador ou banco de carregamento de energia.



Passo 3 A luz do LED acende para mostrar que está carregando. A luz LED estará apagada quando o carregamento estiver completo.

Dicas: Para o primeiro uso, por favor, carregue a bateria por 1 hora após a energia ser totalmente utilizada.

**Limpendo o Mágic Kegel Master Gen 2****Antes do Uso**

Por favor, limpe o Kegel Master Gen 2 com detergente ou água morna e sabão antibacteriano antes de usar pela primeira vez.

Após o uso

Por favor, limpe o Kegel Master Gen 2 com limpador ou água morna e sabão antibacteriano e seque-o.

Armazenamento

Mantenha o Master em um local fresco e ventilado. Evite a luz solar direta e mantenha-a longe das crianças.

**Termos e Condições de Garantia**

A Magic Motion dá a este produto a garantia de UM (01) ano a partir da data da compra em caso de defeito de fabricação. Se você encontrar um defeito e notificar a Magic Motion durante o período da garantia, a Magic Motion vai, dentro de seus critérios, substituir o produto gratuitamente.

A garantia cobre defeitos de funcionamento. NÃO COBRE problemas externos causados por deterioração, acidentes, negligência ou mau uso do produto. Qualquer tentativa de abrir ou modificar o produto vai resultar na perda da garantia.

Reclamações dentro do período da garantia devem ser providas de evidência da data da compra do produto. **Guarde seu recibo de compra junto com estes termos de garantia.**

Cartão de Assistência Magic Motion**Informação do Comprador**

Nome:

Tel:


Endereço:

Motivo da Devolução:

Informação do Vendedor


Empresa:

Tel:

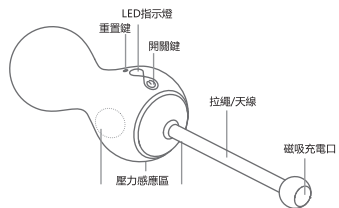

按鍵圖標	按鍵名稱	操作	按鍵作用
	開關鍵	短按/長按	開機/關機
	重置鍵	短按	恢復出廠設置

包裝列表

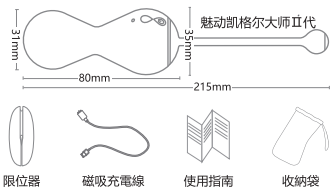

產品規格書

產品型號:SMVO2SC | 材質:矽膠/ABS | 重量:58g | 電池: 200mAh
 額定電壓:5V | 最大充電電流:500mA | 充電時間:60 分鐘
 工作時間:180分鐘 | 防水等級:IPX6

使用步驟

Step1:下載APP

可以通過以下任意一種方式獲得

1.IOS用戶在 APP Store中搜索“凱格爾大師”。
 安卓用戶在 Google Play或應用寶中搜索“凱格爾大師”

2.掃描二維碼下載




3.訪問以下網址下載

www.magicmotion.cn

Step2:連接到您的“凱格爾大師”應用

開啟您的凱格爾大師II代。

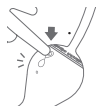

根據應用中的提示連接您的設備。



當手機頁面跳出已連接提示框時
 表示設備連接成功。



Step3:享受凱格爾帶給您的緊緻

將凱格爾大師II代緩緩地放入體內,指示燈朝上開始鍛煉(推薦使用水溶性潤滑液,或者安全套)。



凱格爾大師II代的拉繩內含天線, 內入使用時需要外露至少4cm, 避免影響信號。

Step4: 關機


使用完畢, 長按開關鍵3秒,
 看到指示燈滅後, 即為關機。



小提示: 產品有自動關機功能, 斷開手機連接5分鐘後, 自動關機。


離線使用 (不連接手機)

凱格爾大師II代脫機模式訓練專用, 即壓震模式; 只需開啟凱格爾大師II代, 按圖示, 將凱格爾大師II代緩緩地放入體內, 並通過盆底肌擠壓來控制震動強弱。

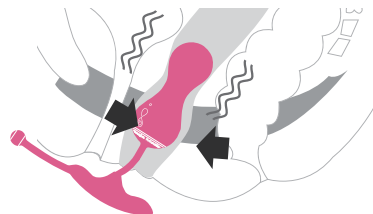


充電方式

Step1 打開磁吸充電口的蓋子,
 將磁吸充電線吸附在充電口上。

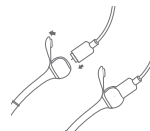

Step2 另一端的口連接至充電器、
 電腦或者充電寶的USB接口。

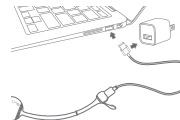

Step3 指示燈亮起來，表示正常充電；
充電完成時，指示燈熄滅。

小提示:第一次使用時，請將電量耗盡，
連續充電1小時左右。




清潔

清潔凱格爾大師II代請用水溶性清潔劑或者抗菌肥皂清洗
乾淨並晾乾。

存放

請將清洗後的凱格爾大師II代裝在保護袋內，存放於乾燥處，
避免陽光直射以及兒童碰觸。

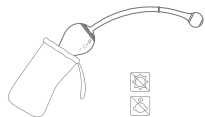

提示：女性經期期間不建議使用，如有婦科及其他不適症狀，請諮詢醫生後
方可使用。

保修須知

1. 本產品保修期壹年，未按商品使用說明書要求使用、
維護、保管而造成損壞的，或因不正確操作，電源
不正常，破損（如 摔落等）而造成損壞的，不在保
修範圍。
2. 產品本身質量問題，請與本公司聯系，請勿自行拆卸，
否則不予保修。
3. 保修時請攜帶本卡和購買憑證，聯系購買商家。

魅動售後服務卡

用戶信息

姓名：

電話：


地址：

售後原因：

賣方信息


銷售商：

電話：

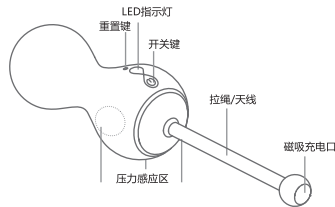

按键图标	按键名称	操作	按键作用
	开关键	短按/长按	开机/关机
	重置键	短按	恢复出厂设置

包裝列表

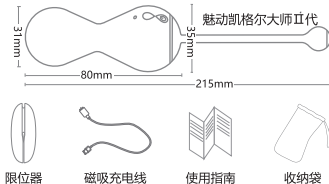

产品规格书

产品型号:SMVO2SC | 材质:硅胶/ABS | 重量:58g | 电池: 200mAh
额定电压:5V | 最大充电电流:500mA | 充电时间:60 分钟
工作时间:180分钟 | 防水等级:IPX6

使用篇

Step1:下载APP

可以通过以下任何一种方式获得

1.IOS用户在 APP Store中搜索“凯格尔大师”。
安卓用户在 Google Play或应用宝中搜索“凯格尔大师”

2.扫描二维码下载



3.访问以下网址下载

www.magicmotion.cn

Step2:连接到您的“凯格尔大师”应用

开启您的凯格尔大师II代。



根据应用中的提示连接您的设备。



当手机页面跳出已连接提示框时
表示设备连接成功。



Step3:享受凯格尔带给您的紧致

将凯格尔大师II代缓缓地放入体内,指示灯朝上开始锻炼(推荐使用水溶性润滑液,或者安全套)。



凯格尔大师II代的拉绳内含天线, 内入使用时需要外露至少4cm, 避免影响信号。

Step4: 关机


使用完毕, 长按开关键3秒, 看到指示灯灭后, 即为关机。




小提示: 产品有自动关机功能, 断开手机连接5分钟后, 自动关机。

离线使用 (不连接手机)


凯格尔大师II代脱机模式训练专用, 即压震模式; 只需开启凯格尔大师II代, 按图示, 将凯格尔大师II代缓缓地放入体内, 并通过盆底肌挤压来控制震动强弱。

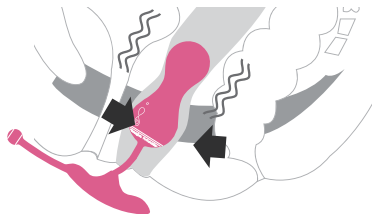**充电方式**

Step1 打开磁吸充电口的盖子, 将磁吸充电线吸附在充电口上。

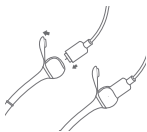

Step2 另一端的口连接至充电器、电脑或者充电宝的USB接口。

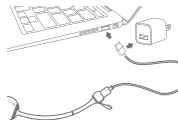

Step3 指示灯亮起来, 表示正常充电; 充电完成时, 指示灯熄灭。


小提示: 第一次使用时, 请将电量耗尽, 连续充电1小时左右。

**清洁**

清洁凯格尔大师I代请用水溶性清洁剂或者抗菌肥皂清洗干净并晾干。

存放

请将清洗后的凯格尔大师I代装在保护袋内, 存放于干燥处, 避免阳光直射以及儿童碰触。

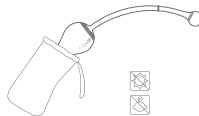

提示: 女性经期期间不建议使用, 如有妇科及其他不适症状, 请咨询医生后方可使用。

注意

本产品只适用于年满18周岁的成年人使用, 远离儿童放置; 使用中如有不适请停止使用。

故障简要判断:

1. 在离线模式下, 开启产品, 按压压力感应区, 如产品受力不震动, 请检查是否需要充电。
2. 在手机控制模式下, 开启震动产品, 如未能正常使用“凯格尔大师”APP控制产品, 请检查手机和电源。

微信客服

加入魅动官方微信公众号: magicmotion, 及时获取最新的软件更新和魅动服务!



客服热线:

4008-270-858

www.magicmotion.cn

测试标准: GB 4706.1-2005
品牌商: 魔性科技 (上海) 有限公司
地址: 上海市闵行区宜山路1888号610室



保修须知

- 1.本产品保修期一年，非产品原因造成的损坏，不在保修范围。
- 2.产品本身质量问题，请与本公司联系，请勿自行拆卸，否则不予保修。
- 3.保修时请携带本卡和购买凭证，联系购买商家。

售后服务卡

用户信息

姓名：

电话：

地址：

售后原因：

卖方信息

销售商：

电话：

SMV02SC-M-20210615-01

Touch Beyond Your Thought



Magic Motion



www.magicmotion.fun